


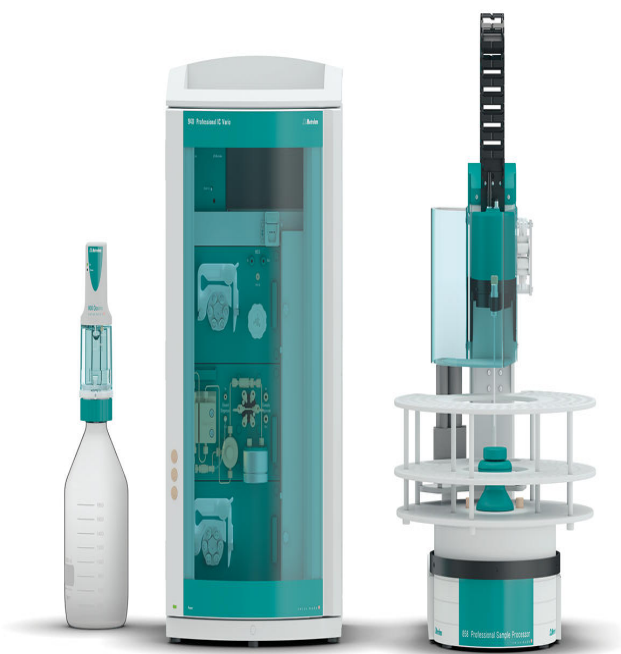

「ProfIC Vario 7 Anion」 – インライン希釈とインライン透析を備えた陰イオン分析用プロフェッショナルIC Vario システム

ProfIC-Vario-07-Anion

メトロームのインライン透析、インライン希釈、連続サプレッション、電気伝導度検出器を備えたプロフェッショナルIC Vario システムは、高い成分濃度や測定の高い成分を含む試料の陰イオンを完全自動測定することができます。

典型的な使用領域:

- プロセス水、洗浄水、廃水
- 油を含む水
- バイオディーゼル分析用のインライン抽出

システム図

納品範囲 ProfIC-Vario-07-Anion

Order Number	説明	数量
2.940.1510	940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP/Prep 1 940 プロフェッショナル IC Vario ONE/SeS/PP/Prep 1 は、インラインウルトラフィルタレーションやインライン透析などといったメトロームインラインサンプル前処理のコンビネーションによる、連続サプレッションおよびサプレッサー再生のためのペリスタリックポンプを備えたインテリジェントコンパクトIC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。 典型的な使用領域: - インラインウルトラフィルタレーションまたはインライン透析後の連続サプレッションによる陰イオンの測定	1 PCS
2.850.9010	IC Conductivity Detector インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。	1 PCS
2.858.0020	858 Professional Sample Processor – Pump 858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ - ポンプは、500 μ Lから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。	1 PCS

2.741.0010

741 Magnetic Stirrer

1 PCS

サンプルチェンジャー用Magnetic Stirrer。
Magnetic Stirrerは、サンプルラックの下に配置されています。



2.800.0010

800 Dosino (ケーブル : 1.5 m)

1 PCS

800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。



6.5330.120

ICアクセサリ: インライン希釈

1 PCS

インライン希釈のための付属品セット。858プロフェッショナルサンプルプロセッサ、800 ドジーノ電動ピュレット、741 マグネチックスターラとの併用に。



6.5330.200

IC機器: インライン透析 Low Volume

1 PCS

高速インライン透析のための付属品セット。858 Professional Sample Processorおよび追加の2チャンネルタイプのペリスタリックポンプとの使用に。



オプションアクセサリ

6.2041.760

**Sample rack 54 x 11 mL + 1
x 300 mL**



6.2041.440

**サンプルラック、148 x 11 mL
および 3 x 300 mL、(ポリ塩化
ビニル製)**



148 個のサンプル容器および3個のリンスボトルに適した 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。
合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.2743.050


サンプル容器 11 mL



2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。
IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン (PP) 樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム (DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7) の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.2743.070

Stopper with perforation

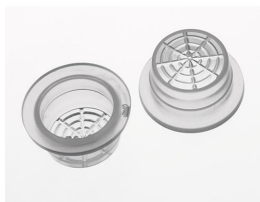

6.2842.000

MSM-HC Rotor A



6.2844.000

MSM-LC Rotor A



6.2832.000

MSM Rotor A



6.2842.020

アダプタスリーブ、MSM



アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。

2.941.0010

941 Eluent Production Module



941 溶離液生成モジュール により、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。

2.800.0010

800 Dosino (ケーブル：1.5 m)



800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL



807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

6.2744.080
M6 thread / UNF 10/32
adapter



6.2842.200
MSM-HC Rotor C



6.6059.422
MagIC Net 4.2 Professional:
1ライセンス

MagIC Net

6.6059.423

MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライ
センス

