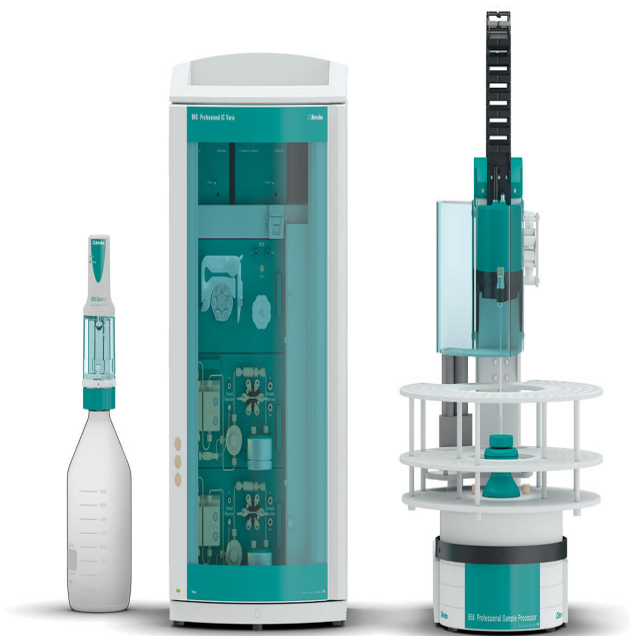




「ProfIC Vario 14 AnCat」 – メトロームのピックアップ注入テクニック（MiPuT）を備えた陰陽イオン分析用プロフェッショナルIC Vario システム

ProfIC-Vario-14-AnCat

メトロームのインテリジェントピックアップ注入テクニック（MiPuT）、連続サプレッション、電気伝導度検出器を備えたプロフェッショナルIC Vario システムは、極微量なサンプルの陰イオンと陽イオンの両方を測定することができます。

典型的な使用領域:

- 微量しかないあらゆるタイプと分野のサンプル
- 生化学分野のサンプル
- 環境分野の抽出サンプル

システム図

納品範囲 ProfIC-Vario-14-AnCat

Order Number	説明	数量
2.940.2500	940 Professional IC Vario TWO/SeS/PP 940 プロフェッショナル IC Vario TWO/SeS/PP は連続サプレッション（1チャンネル）とサプレッサー再生のためのペリスタリックポンプを備えた2チャンネルタイプの-IC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。 典型的な使用領域: - 陰イオンおよび陽イオンの並行測定のための標準装置 - 陰イオンおよび陽イオンのためのトレース分析 - 陰イオンおよび陽イオンのオンラインモニタリング	1 PCS
2.850.9010	IC Conductivity Detector インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。	2 PCS
2.858.0020	858 Professional Sample Processor – Pump 858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ - ポンプは、500 μ Lから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。	1 PCS

2.800.0010

800 Dosino (ケーブル : 1.5 m)

1 PCS



800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。

6.5330.170

IC機器: MiPuT

1 PCS



サンプルピックアップのドジーノ設置のための付属品セット (メトロームのインテリジェントピックアップインジェクション技術)。

6.1825.290

PEEK sample loop 250 µL

1 PCS



オプションアクセサリ

6.2041.480

サンプルラック 159 x 2 mL および 3 x 300 mL、(ポリ塩化ビニル製)



159個のサンプル容器および3個のリンスボトルに適した 858 Professional Sample Processor のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 2 mL (エッペンドルフ)、6.1608.080、6.1627.000。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.1050.420

Metrosep C 4 - 150/4.0



Metrosep C 4 - 150/4.0は、短時間で高い分離性能を示す、マイクロボア分離カラムの陽イオン分析における汎用的な標準カラムです。Metrosep C 4 - 150/4.0は、水性溶媒中のアルカリ金属およびアルカリ土類金属の分析に理想的な分離カラムです。

6.1050.500

Metrosep C 4 Guard/4.0



Metrosep C 4 Guard/4.0 は C 4 カラム素材を含み、シリカゲルを基材とする全ての Metrosep 陽イオンカラムを保護します。粒子状物質や汚れを確実に抑え、その結果分析用分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。手頃な値段もさらなるプラスポイントの1つです。Metrosep C 4 Guard/4.0 は «On Column Guard System» に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けすることができます。

6.2842.000

MSM-HC Rotor A



6.2844.000

MSM-LC Rotor A



6.2832.000

MSM Rotor A



6.2842.020

アダプタスリーブ、MSM



アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。

2.941.0010

**941 Eluent Production
Module**



941 溶離液生成モジュールにより、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。

6.5330.090

**ICアクセサリ：溶離剤生成モ
ジュールの追加溶離剤**



溶離液生成モジュールの付属品セット 溶離剤拡張のための全てのパーツを含みます。レベルセンサーは用途に応じてご注文ください。

2.800.0010

**800 Dosino (ケーブル：1.5
m)**



800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。

6.2769.110

**EMPTY sensor for level
sensor for 2 L bottles**



6.6059.422

**MagIC Net 4.2 Professional:
1ライセンス**



6.6059.423

**MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライ
センス**

