



TitriC Vario pro II – 包括的な陰イオンおよび陽イオンの分析のためのICおよび滴定を組み合わせたシステム

TitriC Vario pro II

TitriC Vario pro II – あらゆる陰イオンおよび陽イオンの分析向け。

サンプル温度、電気伝導度、pH値の直接測定、p値やm値の滴定、カルシウムやマグネシウムを含む陽イオンおよび陰イオンのイオンクロマトグラフによる測定のための全自動システム。

このシステムは856 導電率モジュール、2つの800 ドジーノ電動ビュレット、802 プロペラスターラー、905 タイランド、815 ロボテック USB サンプルプロセッサ XL、サプレッションを含まない930 コンパクト IC Flex Oven/Deg、連続サプレッションを備えた930 コンパクト IC Vario Oven/SeS/PP/Degで構成されています。

TitriC Vario – イオン分析のパワーパック。

納品範囲 TitrIC Vario pro II

Order Number	説明	数量
2.930.2560	930 Compact IC Flex Oven/SeS/PP/Deg 930 コンパクト IC Flex Oven/SeS/PP/Deg は カラムオープン、連続サプレッション 、サプレッサー再生のためのペリスタリックポンプ、内蔵式 脱気装置 を備えたインテリジェントコンパクトIC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。 典型的な使用領域: - 連続サプレッションおよび電気伝導度検出器による陰イオンの測定	1 PCS
2.930.2160	930 Compact IC Flex Oven/Deg 930 コンパクト IC Flex Oven/Deg は カラムオープン と内蔵式 脱気装置 を備えた サプレッションの無い インテリジェントコンパクトIC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。 典型的な使用領域: - 電気伝導度検出器によるサプレッション無しの陰イオンおよび陽イオンの測定 - UV/VIS検出器またはアンペロメトリック検出器によるシンプルな使用	1 PCS
6.2832.000	MSM Rotor A 	1 PCS

6.2842.020

アダプタスリーブ、MSM

1 PCS



アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。

2.786.0040

786 Swing Head

1 PCS



2.800.0010

800 Dosino (ケーブル : 1.5 m)

2 PCS



800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。

2.802.0020

サンプルチェンジャー用 802 Stirrer

1 PCS



サンプルチェンジャーおよび Sample Processor 用ロッドスターラ。
6.1909.020 プロペラスターラ 104 mm と固定取付けされたケーブル付き。

2.815.0020


815 Robotic USB Sample Processor XL (1T/2P)

1 PCS

検体数が多量なルーチンサンプルの連続自動処理、複雑なサンプル前処理、並行作業のためのワークステーション1つおよび内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ付いたロボットUSBサンプルプロセッサXL。LQH（リキッドハンドリング）作業のためのドージングデバイスを3つまで接続することができます。

様々な用途に対応するため、サンプルラック、スターラー、滴定ヘッド、スイングアーム、Swing Head、サンプル容器はアプリケーションに合わせて別途ご注文ください。

制御はTouch Controlにより「スタンドアローン」で動作します。PC制御には以下のソフトウェア製品を選択することができます：滴定ソフトウェアtiamo™、クロマトグラフィーソフトウェアMagIC Net、ボルタンメトリーソフトウェアviva、またはOMNIS。

2.850.9010


IC Conductivity Detector

2 PCS

インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。

2.856.0010



856 Conductivity Module

1 PCS

既存のTitrandoシステム、または900 Touch Controlと組み合わせた「スタンドアローン」の拡張としての電気伝導度測定モジュールです。856 Conductivity Moduleにより、電気伝導度と温度だけでなく、TDSと塩分も測定することができます。最新テクノロジーの電気伝導度測定セル、5リング測定セルがこれをサポートします。

Conductivity Moduleには、プリンター、バーコードリーダーまたはサンプルチェンジャーを接続するUSBインターフェースが2つ、スターラーまたはDosinoを接続するMSBインターフェースが4つ装備されています。OMNISソフトウェア、tiamoソフトウェアもしくはTouch Controlを適用。GMP/GLP基準およびFDA 基準21 CFR Part 11の要件を満たしています (必要な場合)。

2.905.0010



905 Titrando

1 PCS

Dosino-ドージングシステムを用いた用途のための測定インターフェースを備えた電位差滴定のためのハイエンド滴定装置。

- タイプ800 Dosinoのドージングシステムが4つまで
- 変動滴下量当量点滴定 (DET)、等量滴下当量点滴定 (MET)、終点滴定 (SET)
- イオン選択性電極を用いた測定 (MEAS CONC)
- モニタリング、LQHを備えたドージング機能
- 追加スターラーまたはドージングシステムのための4つのMSBコネクタ
- インテリジェント電極「iTrode」
- USB コネクタ
- OMNISソフトウェア、tiamoソフトウェアもしくはTouch Controlを適用
- GMP/GLP基準およびFDA 基準21 CFR Part 11の要件を満たしています (必要な場合)

6.0277.300


Pt1000付きiAquatrode Plus

1 PCS

低濃度イオンの水性溶媒（例えば飲料水、プロセス水など）におけるpH測定/滴定のためのセンサーデータのメモリーチップおよびPt1000温度センサーが内蔵されたインテリジェントな複合pH電極。この電極は、これらのサンプルにおいて非常に速い応答時間を有します。

固定グラッドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

ブリッジ内部液として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ を使用する場合、保存液中での保存が推奨されます。

ブリッジ内部液は、塩化物フリーの内部液（例えば、硝酸カリウム $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)) と交換することができます。使用される内部液にて保管します。

iTrodeはTitrando、Ti-Touch、または913/914 メーターにて使用することが可能です。

6.0915.100


5リング電気伝導度測定セル $c = 0.7\text{cm}$ -1Pt1000付き (固定式ケーブル)

1 PCS

セル定数 $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ (指針値) の5リング電気伝導度測定セル、内蔵Pt1000温度センサーおよび856 Conductivity Moduleとの接続のための固定式ケーブル (1.2 m) 付き。

このセンサーは、以下のような液体などにおける中程度の電気伝導度の測定に適しています：

- 飲料水
- 表面水
- 廃水

6.1414.060


マイクロ滴定容器上部 / ECO

1 PCS

6.1415.250

Titration vessel / 50-150 mL

1 PCS



6.1462.040

Robotic arm with transfer head for 786 Swing Head, right swinging

1 PCS



6.1543.170

Aspiration tip / M8 thread

1 PCS



6.1543.210

3-way stopper with antidiffusion valve

1 PCS



6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45

1 PCS



6.1618.020

Thread adapter S 40 to GL 45

1 PCS



6.1805.030

FEP tubing / M6 / 150 cm

1 PCS



6.1805.060

FEP tubing / M6 / 60 cm

1 PCS



6.1805.110

FEP tubing / M6 / 80 cm

2 PCS



6.1808.010

Coupling piece 2 X M6

1 PCS



6.1808.060

T connector / M6 inner

1 PCS



6.1808.280

807 Dosing Unit ポート 4 アダプター、M6 内側

1 PCS

FEP チューブ / M6 との接続のため、807 Dosing Unit
のポート 4 に使用するアダプター。



6.1835.050

PEEK sample tube

1 PCS



6.2001.070

Support stand for Sample Processors


1 PCS



6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

1 PCS

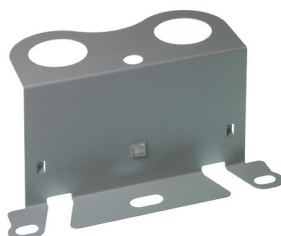

6.2134.040

接続ケーブル RS-232 DB9 - IBM-PC(DB9)

1 PCS



メトローム RS-232インターフェースとパソコンの接続用。Titrino、Titrino plus、および 756、831 KF Coulometer、RS-232/USB Box 用

6.2148.050

USB/RS-232 Converter for 900 Touch Control

2 PCS



6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin

2 PCS



6.2307.230

pH 4、7、9の緩衝液

1 PCS

pH 4.00/7.00/9.00 (25 ° C) の混合緩衝液、単回使用
用小袋入り、無色、1箱に10×30 mL×3袋入り



6.2325.000

pHit kit

1 PCS

pH 電極用メンテナンスキット
キットには以下が付属しています:

- 50 mL 洗浄液
- 50 mL 3M KCl 溶液
- 50 mL 保管溶液
- 保存容器 2 個
- 使用説明書



6.2629.000

Screw nut to needle holder IC

1 PCS



6.2709.090

Stopper

1 PCS



6.2730.020

Septum stopper

1 PCS



6.2730.030

Stopper

5 PCS



6.2730.060

Screw nipple

3 PCS



6.2730.080

Screw nipple

1 PCS



6.2744.070

Pressure screw short

1 PCS



6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter

2 PCS



6.2763.000

Flow-through cell for the 6.0915.100/6.0920.100 1 PCS


6.2833.000

Needle/tube holder 1/8 in.

1 PCS



6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

1 PCS



807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

1 PCS



807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

2.854.0010



854 iConnect

1 PCS

854 iConnect - インテリジェント電極 «iTrodes» 用の電極ケーブルと測定アンプ (ケーブル長さ 150 cm)。

オプションアクセサリ

2.804.0010

**804 Ti Stand without stand
rod**



6.2041.800

**サンプルラック 100 x 75 mL、
(ポリ塩化ビニル製)**



100個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.2041.810

**サンプルラック 34 x 150 mL、
(ポリ塩化ビニル製)**



34個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 150 mL ビーカー (トールビーカー)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.2041.820

**サンプルラック 28 x 250 mL、
(ポリ塩化ビニル製)**



28個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です：

6.14332.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.2041.830

**サンプルラック、28 x 200
mL、(ポリ塩化ビニル製)**



28 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です：

6.1459.310。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.2041.840

**サンプルラック、59 x 120
mL、(ポリ塩化ビニル製)**



59 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です：

6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.1432.210

**透明ガラス製サンプルビーカー
75 mL、1 個**



透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、サンプルラック
6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800 および 6.2041.900 に適
合、1 個

6.1432.320

**透明ガラス製サンプルビーカー
250 mL、1 個**



透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、サンプルラック
6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個

6.1459.300

**プラスチック製 (PP) サンプル
ビーカー 120 mL、250 個**



プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、
サンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、
6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適
合、250 個