



OMNIS Workstation Module (1T/0P)

2.1024.0010

用于安装到 OMNIS Sample Robot WSM 中的模块。该模块包含 1 个用于自动处理样品容器的工作站，不需要使用泵。该工作站可置放分析用的样品杯。两次分析之间会将所使用的传感器在工作站的存储杯中进行清洁或置放。如果分析时需要搅拌，则必须为该工作站加装独立的棒式搅拌器或磁力搅拌器。

Scope of delivery 2.1024.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.1024.0010	OMNIS Workstation Module (1T/0P)

用于安装到 OMNIS Sample Robot WSM 中的模块。该模块包含 1 个用于自动处理样品容器的工作站，不需要使用泵。该工作站可置放分析用的样品杯。两次分析之间会将所使用的传感器在工作站的存储杯中进行清洁或置放。如果分析时需要搅拌，则必须为该工作站加装独立的棒式搅拌器或磁力搅拌器。



1 PCS

6.01804.500 排出管的软管适配器

Pick&Place 取放模块上排出管的软管适配器和 OMNIS Sample Robot Pick&Place 中的泵模块。



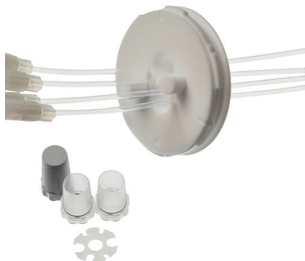
1 PCS

6.02705.000 软管和电缆槽

用于整理敷设 Pick&Place 取放模块和滴定仪之间的软管和电缆



Optional accessories

Order no.	Description	
6.01403.000	滴定头 6xNS14/ 3xNS9 (P&P) 具有 6 NS14 和 3 NS 9 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place 的 Pick&Place 取放模块中	
6.01403.010	滴定头 4xM10 (P&P) 具有 4 M10 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place 的 Pick&Place 取放模块中	
6.01403.020	滴定头 4xM10，用于卡尔·费休滴定法（P&P） 具有 4 M10 开孔的滴定头，可用于具有 4 M10 螺旋接头和塞子的 OMNIS Sample Robot Pick&Place 的卡尔·费休滴定法。	
6.01403.040	滴定头 2xNS14 (P&P) 带有 2 个 NS14 开口的滴定头，用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place 取放模块，以及三个剂量提示装置。准备装配冲洗喷嘴。抽吸软管已经被放入滴定头中。	

6.01403.030 滴定头 3 个 NS14/ 4 个 6.4mm (P&P)

具有 3 个 NS14 和 4 个 6.4 mm 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place（配备 2 个收回的加液器尖管）的 Pick&Place 取放模块中的 120 mL 样品杯。已准备好装备冲洗和抽吸管。



6.01403.060 滴定头 3 个 NS14/4 个 6.4mm，用于 200 mL 一次性样品杯 (P&P)

具有 3 NS14 和 4x 6.4 mm 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place（配备 2 个收回的加液器尖管）的 Pick&Place 取放模块中的 200 mL PP 一次性样品杯 (6.1459.310) 或 150 mL 玻璃烧杯（高形状，无喷口）。已准备好装备冲洗和抽吸管。



6.01404.030 烧杯适配器，用于 OMNIS 120 mL 样品杯

烧杯适配器，可将 120 mL 样品杯在 Pick&Place 取放模块的滑台中居中定位



6.01404.040 烧杯适配器，用于 OMNIS 75 mL 样品杯

烧杯适配器，可将 75 mL 样品杯在 Pick&Place 取放模块的滑台中居中定位



6.01404.020 样品杯200 mL 的烧杯适配器

烧杯适配器，可将 200 mL 样品杯在 Pick&Place 取放模块的滑台中居中定位。



6.01403.050 KFT 滴定法用滴定头，带加强型滴定管头 (P&P)

OMNIS Sample Robot Pick&Place 的 Pick&Place 取放模块中用于卡尔·费休滴定法的滴定头。该滴定头除了 2 个加强版防扩散滴管头外，还提供了一个供使用一个均质匀浆仪 (Polytron 1300D) 或棒式搅拌器的开孔。



6.01404.050 烧杯适配器，用于 150 mL 样品杯

烧杯适配器，可将 150 mL 样品杯在 Pick&Place 取放模块的滑台中居中定位。



2.1006.0010 OMNIS Rod Stirrer Sample Robot

棒式搅拌器，可直接连接至 OMNIS Sample Robot，带有固定安装的电缆（2.5米）。



6.05800.540 升级 Pick&Place 取放模块 WSM

该套件包含为现有 OMNIS Workstation Module (1T/0P) 或 (1T/2P) 扩展第二个工作站所需的所有组件。通过扩展，可使样品吞吐量加倍。



6.05800.560 升级搅拌器 WSM

该套件包含为 OMNIS Workstation Module 的工作站配备磁力搅拌器所需的所有组件。



6.05800.570 升级蠕动泵模块 WSM

该套件包含为 OMNIS Workstation Module 升级 2 台泵所需的所有组件。套件既可在从 0 扩展为 2 台泵时，也可以在从 2 台泵扩展为 4 台泵时使用，可以有效地清洁传感器和样品容器。除了所需的泵以外，包含了所有所需的管和液罐，以便分别装备 1 台冲洗和抽液泵。



6.02700.020 WSM 连接板

该连接板在 1 个 Sample Robot WSM M 或 L 上连接 2 个 OMNIS Workstation Module，为其赋予额外的稳定性。



该适配器可在带螺旋式滴定头的自动进样器上使用 Sample Processor Generation (814/815/855) 的滴定头。

