


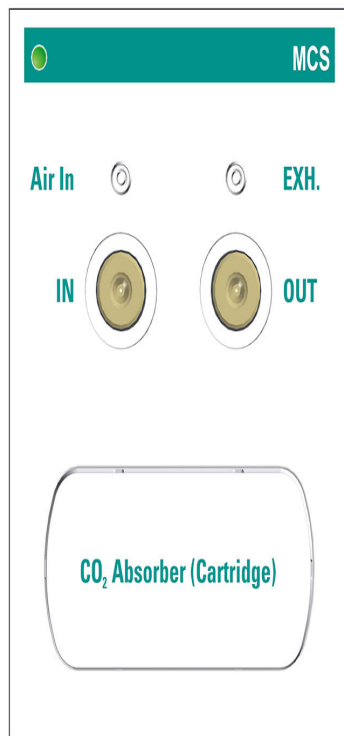

OMNIS MCS Unit

2.1056.0710

OMNIS MCS Unit 在 OMNIS IC System 中用作 CO₂ 抑制器。Metrohm CO₂ Suppressor (MCS) 从淋洗液流中清除 CO₂。MCS 与 MSM 一起作为序列抑制器使用。这样可降低背景传导率和减少基线噪音，从而改善指示灵敏度。可最大程度降低系统峰。


在 MCS 中，淋洗液流经可渗透气体的毛细管。通过真空泵产生压力和浓度差，淋洗液流中的 CO₂ 从毛细管中扩散出去。为了从 MCS 中清除 CO₂，要通过进气口持续吸入不含 CO₂ 的气流。

欢迎您了解有关序列抑制法的更多信息：离子色谱专题论著。

规格说明书：

- 真空形成时间： 10 s
- 流动路径： 不含金属

Scope of delivery 2.1056.0710

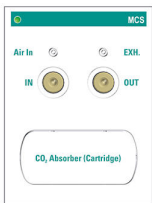Order Number	Description	Quantity
1.1056.0710	OMNIS MCS Unit OMNIS MCS Unit 在 OMNIS IC System 中用作 CO₂ 抑制器。Metrohm CO₂ Suppressor (MCS) 从淋洗液流中清除 CO₂。MCS 与 MSM 一起作为序列抑制器使用。这样可降低背景传导率和减少基线噪音，从而改善指示灵敏度。可最大程度降低系统峰。 在 MCS 中，淋洗液流经可渗透气体的毛细管。通过真空泵产生压力和浓度差，淋洗液流中的 CO₂ 从毛细管中扩散出去。为了从 MCS 中清除 CO₂，要通过进气口持续吸入不含 CO₂ 的气流。 欢迎您了解有关序列抑制法的更多信息：离子色谱专题论著。	1 PCS
		
6.02837.110	CO2 Absorber (Cartridge) 用于去除 OMNIS MCS Unit 所吸入空气中 CO 的吸收器滤芯，可确保基线保持稳定一致。	1 PCS
		
6.01831.150	PEEK (聚醚醚酮) 毛细管 MCS - COND, 120/0.18 mm 经过预裁切的 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管，有 OMNIS IC 标识标签	1 PCS
		

Optional accessories

6.02837.110
CO₂ Absorber (Cartridge)

用于去除 OMNIS MCS Unit 所吸入空气中 CO 的吸收器滤芯，
可确保基线保持稳定一致。

