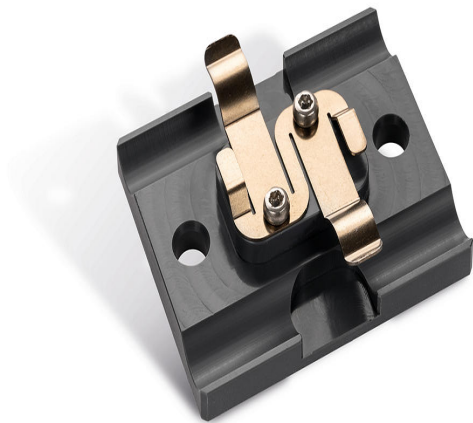




MISP 捕集柱支架

6.02006.110

支架用于将捕集柱固定在 OMNIS MISP Unit 中。

Optional accessories

6.1014.000

Metrosep A Trap 1 - 100/4.0
0



高容量的阴离子柱，用于清洗淋洗液流。即便是高质量级别的试剂，例如 «Ultrapur» 或 «puriss» 仍可能有极少阴离子杂质。Metrosep A Trap 1 - 100/4.0 能确保拦住这些杂质。此柱主要用于梯度应用中。

6.1014.100

Metrosep RP Trap 1 - 50/4.0



Metrosep 柱 RP Trap 1 - 50/4.0 用于从淋洗液中清除有机污染。Metrosep RP Trap 1 - 50/4.0 柱有助于避免在基线中的淋洗故障，尤其是在梯度系统中。还建议将其用于清洁 Metrosep Dual 4 分离柱的对氰基苯酚淋洗液。

6.1014.150

Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0
0



Metrosep 柱 RP Trap 2 - 100/4.0 用于从淋洗液中清除有机污染。Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0 柱有助于避免在基线中的淋洗故障，尤其是在梯度系统中。它基于聚合材料所制。因此 Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0 既可用于酸性 pH 范围也可用于碱性 pH 范围。

6.1014.200

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0
(捕获柱)



Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 捕获柱用于清除水溶剂中的离子杂质，即阳离子和阴离子杂质。建议将其用于清洁输送水，尤其用于 «MISP», 即 «Metrohm Inline Sample Preparation» (英蓝技术)。通过使用 Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 保护柱可大幅降低输送水对系统空白值的影响。

6.1015.000

Metrosep C Trap 1 - 100/4.0



高容量的阳离子柱，用于清洗淋洗液流。即便是质量级别高的化学品试剂，例如 «Ultrapur» 或 «puriss» 仍可能有极少阳离子杂质。Metrosep C Trap 1 - 100/4.0 能确保安全拦截这些杂质。

6.1015.200

Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4.0



Trap 柱用于清除淋洗液中的硼酸污染。Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4.0 主要用于使用氢氧化物淋洗液分析碳水化合物。

6.1015.300

Metrosep CO3 Trap 1 - 100

/4.0



Trap 柱用于清除氢氧化物淋洗液中的碳酸盐痕量。