



稀释容器盖


6.02762.110

用于 OMNIS IC Autosampler 或 OMNIS IC Autosampler COOL 的稀释容器盖。

Optional accessories

2.1054.0010

OMNIS IC Autosampler Module

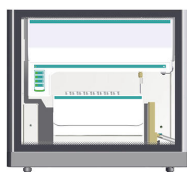

OMNIS IC Autosampler 可实现 OMNIS IC System 中样品的自动更换，并根据所选样品架的不同，能够高效处理多达 160 个容量为 5 mL 的小管。作为全新一代 OMNIS IC 中的首款全集成式自动样品处理器，它的标准配置直接安装在 OMNIS IC 的下方。它不是独立仪器，而是 OMNIS IC System 的组成部分，可通过 OMNIS Software 方便地进行控制。

主要特性：

- 紧凑的占地面积：可直接放置在 OMNIS IC 下方。
- 高样品通量：96 个 10 mL 小管、160 个 5 mL 小管、192 个（1500、700、300） μ L HPLC 小管、384 个 2 mL 孔板（深孔板）。
- 高速（30 秒/5 μ L 进样）
- 可拆卸的自动样品处理器托盘，便于装载和卸载
- 便于装载和卸载的内部照明装置
- 快速精确的 xyz 进样针驱动，带自动小管识别功能
- 后续照明和状态显示，用于进样针运动及自动样品处理器状态的视觉追踪
- 对不同的样品容器和样品架类型（包括定制样品架）具有高度灵活性
- 六个集成位置，用于 50 mL 试剂瓶，例如用于标准溶液或冲洗液
- 标配集成式冲洗站和漏液检测，实现最高安全性
- 完全集成于 OMNIS Software 中
- 可选升级：两位三通阀、稀释台、条形码读取器

2.1054.0020

OMNIS IC Autosampler Module COOL



OMNIS IC Autosampler COOL 可实现 OMNIS IC System 中样品的自动更换，并根据所选样品架的不同，能够高效处理多达 160 个容量为 5 mL 的小管。此外，OMNIS IC Autosampler COOL 还提供了在 4 ° C 至 22 ° C 范围内精确控温的选项，可对大量样品进行冷却。冷却功能特别适用于热不稳定样品及生化相关样品，例如用于有机酸、卤代乙酸、氨基酸和碳水化合物的分析。

主要特性：

- 紧凑的占地面积：可直接放置在 OMNIS IC 下方。
- 温度调节范围 4 ° C 至 22 ° C
- 高样品通量，可冷却大量样品：96 个 10 mL 小管、160 个 5 mL 小管、192 个（1500、700、300） μ L HPLC 小管、384 个 2 mL 孔板（深孔板）。
- 高速（30 秒/5 μ L 进样）
- 可拆卸的自动样品处理器托盘，便于装载和卸载
- 便于装载和卸载的内部照明装置
- 快速精确的 xyz 进样针驱动，带自动小管识别功能
- 后续照明和状态显示，用于进样针运动及自动样品处理器状态的视觉追踪
- 对不同的样品容器和样品架类型（包括定制样品架）具有高度灵活性
- 六个集成位置，用于 50 mL 试剂瓶，例如用于标准溶液或冲洗液
- 标配集成式冲洗站和漏液检测，实现最高安全性
- 完全集成于 OMNIS Software 中
- 可选升级：两位三通阀、稀释台、条形码读取器

6.02762.100

稀释容器



用于 OMNIS IC Autosampler 和 OMNIS IC Autosampler COOL 的在线稀释混合容器。