



OMNIS IC 设备：D-INJ，PP

6.05331.020

用于 OMNIS IC 中满样品环进样的附件套件：使用该技术，样品环可通过 OMNIS Peristaltic Pump Unit 进行填充。

前提：

OMNIS IC S/M/L 与 OMNIS IC AS/ASCOOL，包括：

- 可用的 OMNIS Peristaltic Pump Unit

Scope of delivery 6.05331.020

Order Number	Description	Quantity
6.2744.070	压力螺丝（短） 较短的版本。带UNF 10/32接口。5件装。PEEK泵头的备用件。	1 PCS
		
6.2744.034	2 个 Olive/UNF 10/32 两通 连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。	1 PCS
		
6.01826.020	泵管，内径 1.0 mm，白色 - 白色 内直径为 1.0 mm 的泵管，用于 OMNIS IC System 中的 Peristaltic Pump Unit。该泵管可实现液体的受控和可靠输送，例如用于样品溶液。其设计旨在运行期间保持一致的流量性能。其材料特性支持在常规分析条件下稳定运行。	1 PCS
		

6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m


1 PCS



Optional accessories

2.1056.1010

OMNIS Peristaltic Pump Unit 1-Channel

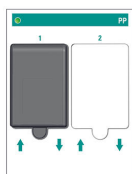

OMNIS Peristaltic Pump Unit 作为输送样品和辅助溶液的 OMNIS IC System 中的蠕动泵使用。

它基于容积置换原理工作，即通过泵管的外部机械变形挤压液体流经泵管。通过将其压紧在旋转的轮毂上使泵管变形。


单通道蠕动泵可扩展为双通道蠕动泵，两个通道可以按不同的旋转速度运行。

规格说明书：

- 通道数量：1（可扩展为 2）
- 旋转速度递增：2.5 rpm
- 最低旋转速度：2.5 rpm
- 最大旋转速度：250 rpm
- 转动方向：顺时针方向

2.1056.1020

OMNIS Peristaltic Pump Unit 2-Channel

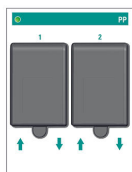

OMNIS Peristaltic Pump Unit 作为输送样品和辅助溶液的 OMNIS IC System 中的蠕动泵使用。

它基于容积置换原理工作，即通过泵管的外部机械变形挤压液体流经泵管。通过将其压紧在旋转的轮毂上使泵管变形

两个通道可以相互独立地以不同旋转速度运行，这提高了各种应用的灵活性。

规格说明书：

- 通道数量：2
 - 旋转速度递增：2.5 rpm
 - 最低旋转速度：2.5 rpm
 - 最大旋转速度：250 rpm
 - 转动方向：顺时针方向
-