



OMNIS IC 设备：PP Reg.

6.05332.040

用于通过 Peristaltic Pump Unit 进行 MSM 再生的附件套件。

前提：

OMNIS IC S/M/L，包括：

- 可用的 OMNIS Peristaltic Pump Unit 通道

Scope of delivery 6.05332.040

Order Number	Description	Quantity
6.02837.040	滤管 带 Luer 式适配器的滤管，保护淋洗液和试剂免受颗粒物污染。	1 PCS
		
6.05000.010	附件包：OMNIS IC 瓶，PP，2 L 用于将供给瓶安装到 Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control 上的 OMNIS IC 附件套件。	1 PCS
		
6.2744.034	2 个 Olive/UNF 10/32 两通 连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。	1 PCS
		

6.01803.110

PTFE (聚四氟乙烯) 毛细管 RO - PP, 900/0.5 mm 1 PCS

经过预裁切的 PTFE (聚四氟乙烯) 毛细管, 有 OMNIS IC 标识标签



6.01826.010

泵管, 内径 0.5 mm, 橙色 - 黄色 1 PCS


内直径为 0.5 mm 的泵管, 用于 OMNIS IC System 中的 Peristaltic Pump Unit。该泵管可实现液体的受控和可靠输送, 例如用于渗析、抑制器再生或 PCR 溶液。其设计旨在运行期间保持一致的流量性能。其材料特性支持在常规分析条件下稳定运行。



Optional accessories

2.1056.1010

OMNIS Peristaltic Pump Unit 1-Channel

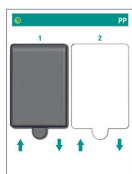

OMNIS Peristaltic Pump Unit 作为输送样品和辅助溶液的 OMNIS IC System 中的蠕动泵使用。

它基于容积置换原理工作，即通过泵管的外部机械变形挤压液体流经泵管。通过将其压紧在旋转的轮毂上使泵管变形。


单通道蠕动泵可扩展为双通道蠕动泵，两个通道可以按不同的旋转速度运行。

规格说明书：

- 通道数量：1（可扩展为 2）
- 旋转速度递增：2.5 rpm
- 最低旋转速度：2.5 rpm
- 最大旋转速度：250 rpm
- 转动方向：顺时针方向

2.1056.1020

OMNIS Peristaltic Pump Unit 2-Channel

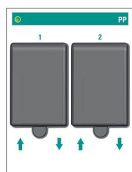

OMNIS Peristaltic Pump Unit 作为输送样品和辅助溶液的 OMNIS IC System 中的蠕动泵使用。

它基于容积置换原理工作，即通过泵管的外部机械变形挤压液体流经泵管。通过将其压紧在旋转的轮毂上使泵管变形

两个通道可以相互独立地以不同旋转速度运行，这提高了各种应用的灵活性。

规格说明书：

- 通道数量：2
 - 旋转速度递增：2.5 rpm
 - 最低旋转速度：2.5 rpm
 - 最大旋转速度：250 rpm
 - 转动方向：顺时针方向
-